

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

החייאה באמצעות מכשירים





- בהחייאה באמצעות מכשירים נדרשת הכרה מושלמת של ציוד ההחייאה
- בביצוע החייאת באמצעות מכשירים נדרשת מיומנות גבוהה
- החייאה באמצעות מכשירים מצריכה שני אנשי צוות לפחות





מנתב אוויר – Airway



- החדרת מנתב האוויר תתבצע בשלב ה-Airway.

- גדלי ה-Airway הקיימים: 00, 0, 1, 2, 3, 4

- תפקיד מנתב האוויר:

- מסייע בניתוב האוויר מהפה לכיוון קנה הנשימה
- מונע סגירת נתיב האוויר ע"י ספאזם (כיווץ) לסתות
- בעת הנשמה במפוח, חובה להשתמש במנתב אוויר

כל הזכויות שמורות





מנתב אוויר – Airway

- מנתב האוויר אינו מונע את צניחת בסיס הלשון ולכן חובה לקבע את הראש לאחר בשיטת "מצח סנטר"

התאמת הגודל:

- יש להצמיד את פיית מנתב האוויר לזווית הפה כך שמנתב האוויר יהיה כלפי מעלה ועד לתנוך האוזן

החדרת המנתב:

- א- סיבובית, כשמבוצעת הטיית ראש לאחר (1/3, 2/3)
- ב- לחיצה על הלשון והחדרה ישרה, כשאין הטיית ראש לאחר (בפצועי טראומה ובתינוקות)
- ג- מנתב אוויר שנפלט פעמיים לא יוחדר בשלישית

Airway יוחדר אך ורק בחולה מחוסר הכרה (רמת הכרה U ו P)





סכנות בשימוש לא נכון במנתב האוויר

• גדול מידי

- חוסם את נתיב האוויר
- פציעה ודימום
- כיווץ מיתרי הקול (לארינגוספאזם)
- דופק איטי (בעקבות גירוי של עצב הוואגוס)
- גירוי והקאה-מגביר סכנות חנק כתוצאה מהפרשות

• קטן מידי

- חסימת נתיב האוויר-מהווה גוף זר
- אינו משיג מטרה



© כל הזכויות שמורות





- ניתן להחדיר מנתב אוויר בחולה מחוסר הכרה, גם אם הוא נושם
- הגודל רשום על האריזה ועל פיית המנתב
- לצבע המנתב אין משמעות
- יש להוציא את מנתב האוויר בעת סילוק הפרשות
- מנתב אוויר שבולט בחלקו העליון-אין לנסות לדחפו פנימה אלא יש להוציאו תחילה ולנסות להחדירו בשנית




כל הזכויות שמורות





סקשן (שואב הפרשות)

- מכשיר לשאיבת הפרשות

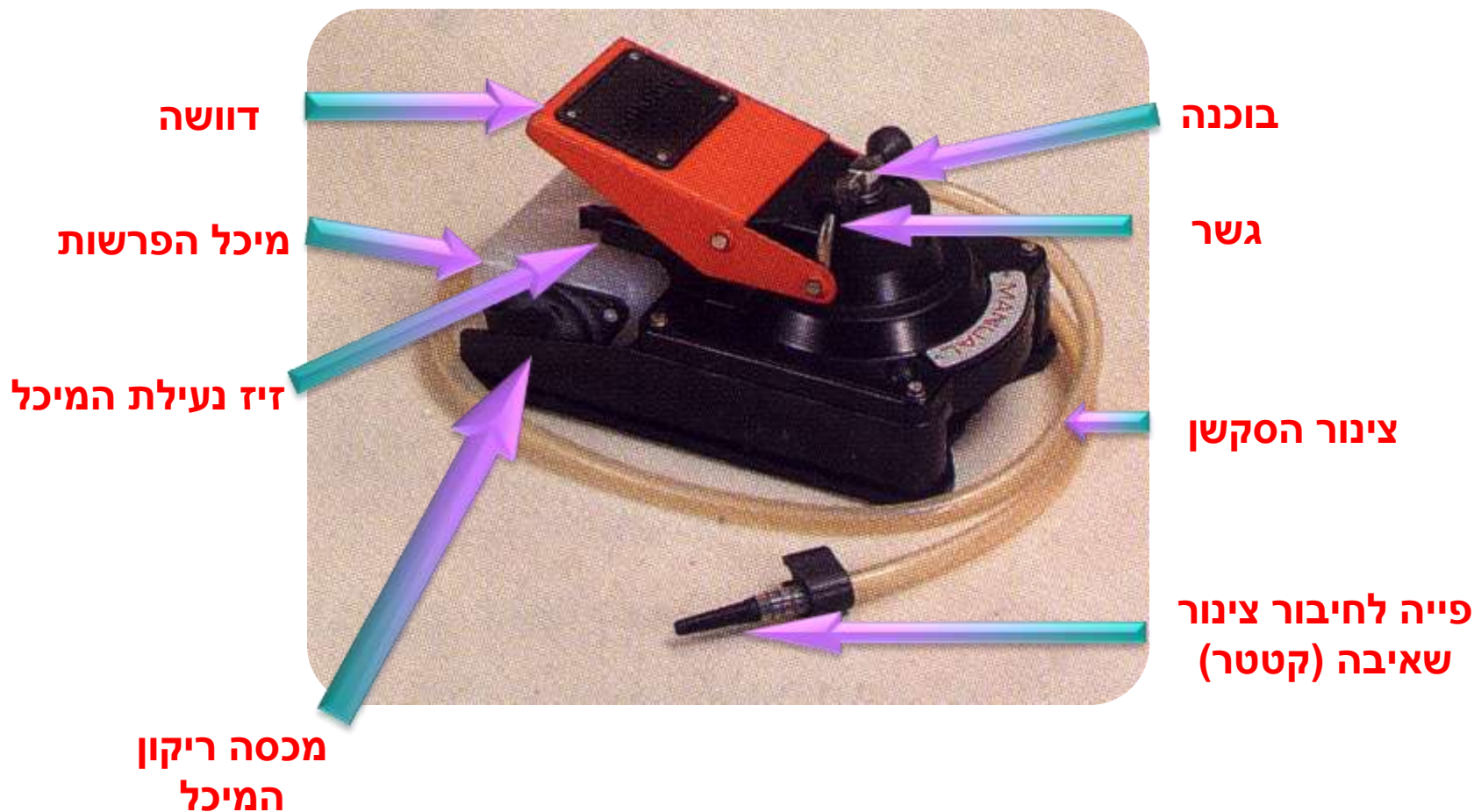




סקשן (שואב הפרשות)

חיבור לצינור חמצן -
להפעלה ע"י לחץ החמצן
(לא מומלץ)

שסתום

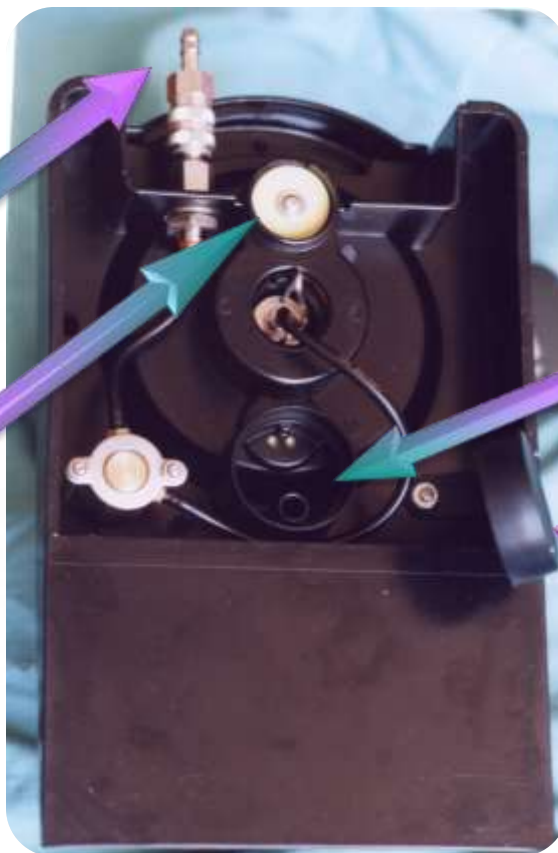

כוסית ביטחון – במקרה
בו מיכל הפרשות
מתמלא

מכסה כוסית
הביטחון

- יש לנקות את כוסית הביטחון לאחר כל שימוש במכשיר





סקשן (שואב הפרשות)



מיכל ההפרשות
(נפחו 600 סמ"ק)

כדורית אוטמת -
מונעת
כניסת הפרשות
למנגנון הסקשן
אם מיכל ההפרשות
מלא



שסתום פורק לחץ
מוריד את לחץ היניקה
ב- 150 מ"מ כספית





הכרת המכשיר:

- משמש לשאיבת הפרשות נוזליות בלבד (דם, קיא, ריר).
- אין לבצע פעולת שאיבה במשך למעלה מ 10 שניות.
- לפני ואחרי השימוש בסקשן יש להנשים 2-3 דקות
- לפני השאיבה יש להוציא את מנתב האוויר מפה החולה
- ניתן לחיבור לקטטר קשיח או גמיש
- אין צורך לשמור על סטריליות הקטטר אך בתום שאיבת ההפרשות יש להרכיב קטטר חדש.
- לאחר ביצוע שאיבת הפרשות יש להקפיד ולנקות את המכשיר.

כל הזכויות שמורות



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

סקשיין אקדח





דגשים בשאיבת הפרשות

- חמצן את החולה לפני ואחרי שאיבה.
- הוצא את מנתב האוויר מפה החולה בזמן השאיבה.
- השאיבה תתבצע תוך כדי הוצאת הקטטר והנעתו.
- בחולה מונשם - עד 10 שניות, גם אם נשארו הפרשות.
- בחולה נושם - עד 2 דקות, גם אם נשארו הפרשות.

© כל הזכויות שמורות





סקשן ילדים

- סקשן הילדים מצוי בערכת הלידה



© כל הזכויות שמורות





מפוח להנשמה - מבנה



מפוח



מסכות
מס' 2 ו-5



שסתום T

שסתום חד-כיווני
בכניסה למפוח

שקית מאגר
להעשרת חמצן

יש לבדוק תקינות המפוח בתחילת כל משמרת





מפוח להנשמה

- נפח המפוח: 1000cc
- בערכה מצויות שתי מסכות: מס' 5 גדולה ומס' 2 בינונית
- בכל תחילת משמרת יש לבצע בדיקת תקינות למכשיר:
 - בדיקת שסתום ה T
 - בדיקת שסתום כניסת האוויר
- בשימוש במפוח חובה להשתמש במנתב אוויר
- נפח ההנשמה הוא עד לתחילת התרוממות החזה של החולה
- יש לסחוט את המפוח בצורה איטית ואחידה





מפוח להנשמה

- הנשמה מהירה ובלחץ גבוה גורמת להתנפחות הקיבה
- יש לחבר חמצן בהקדם האפשרי ולוודא מילוי שקית העשרה בטרם ביצוע ההנשמה
- שסתום פורק לחץ (קיים בחלק מהדגמים) – פורק את לחץ ההנשמה ובכך מונע הנשמה בלחץ גבוה
- חיבור לחמצן לא ייעשה על חשבון רצף ההחייאה

© כל הזכויות שמורות





מפוח להנשמה

חסרונות המפוח

- מחייב שימוש של מנתב אוויר
- דורש מיומנות
- מחייב לפחות שני מטפלים

יתרונות המפוח

- בטיחות למטפל
- הנשמה לפה ולאף ביחד
- העשרה מירבית בחמצן
(95%-90%)
- מאפשר לתת סיוע נשימתי
בלבד
- המטפל יכול לתקשר עם
הסביבה תוך כדי הנשמה





מפוח להנשמה

- תמונות : התאמת מסכה, קיבוע מסכה והנשמה נכונה עם הטיית ראש



© כל הזכויות שמורות





מפוח לתינוקות




• נפח : 250 cc - 350

• בעל צינור/שקית מאגר המעלים את אחוז החמצן עד-95%

• שסתום פורק לחץ (קיים בחלק מהדגמים) – פורק את לחץ ההנשמה ובכך מונע הנשמה בלחץ גבוה

• מסכה מס 0 עגולה


• השימוש במפוח לתינוקות יבוצע בהדרגה - כל אצבע מספקת 50cc יש להתחיל ב-2 אצבעות ולהוסיף בכל פעם אצבע אחת

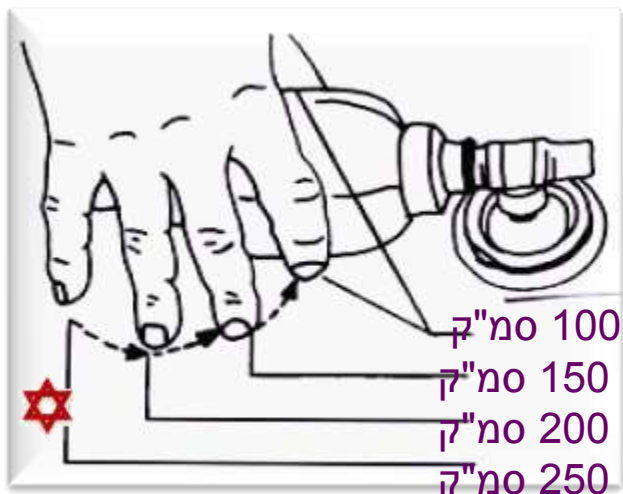

© כל הזכויות שמורות



מפוח "בייבי" – מבנה

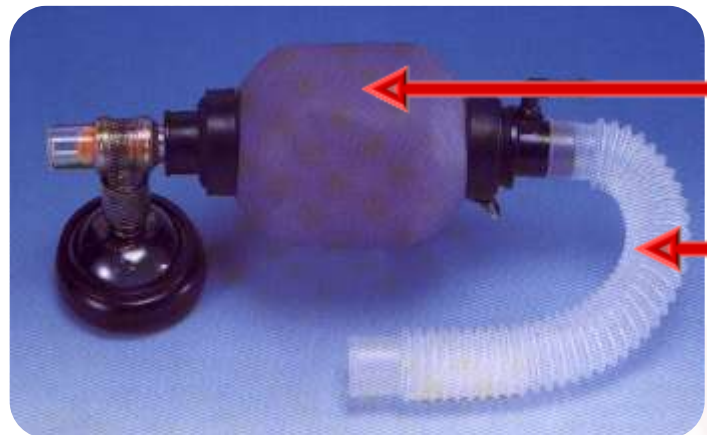

מפוח

צינור מאגר



מסכה



מסכת ילודים
(קיימת נטן)

שסתום פורק לחץ



דשסתום



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

• חובה להשתמש במסנן ויראלי בכל שימוש במפוח



כל הזכויות שמורות





- בזמן ביצוע הנשמה חובה לפתוח את החמצן לפחות על 10 LPM (לשמור על שקית העשרה מלאה)
- בסיום השימוש חובה לפרק את המפוח ולנקות את כל החלקים בצורה יסודית





- סוגי המכלים:

- מיכל H – נפח 20 ליטר, מצוי באמבולנסים ובנט"נים.
- מיכל D – נפח 2.4 ליטר, מצוי באמבולנסים ובנט"נים.

לחץ אטמוספירי נוכחי X נפח המכל

משך השימוש בחמצן בדקות :

זרימת החמצן (ליטר / דקה

הלחץ ב-
PSI

–
15

הלחץ
באטמוספרות





- הקו האדום לשימוש:

נפח המכל	קו אדום לשימוש	תחנות מרוחקות
H – 20 ליטר	30 אטמוספירות	30 אטמוספירות
D – 2.4 ליטר	45 אטמוספירות	70 אטמוספירות

© כל הזכויות שמורות





• התוויות למתן חמצן:

- לחולים עם קשיי נשימה.
- במצבי חוסר הכרה.
- לכל חולה הנמצא במצוקה קרדיאלית.
- לכל חולה עם בעיה המאיימת על אחד ממנגנוני החיים.

© כל הזכויות שמורות





• הוראות בטיחות:

- אין לקרב לאש ולחום
- הרחק משמן (אין לגעת במיכל חמצן עם ידיים משומנות)
- אין להשאיר מיכלים נייחים ללא קיבוע
- יש להשכיב מיכל נייד
- אין לרכון מעל למיכל החמצן
- השתמש רק במיכל תקני
- יש לפתוח את הברז הראשי ראשון ולסוגרו אחרון





חמצן – מבנה הערכה

- מרכיבים של ערכת חמצן:
- ווסת L.P.M
- בלון חמצן+2 ברזים
- שעון למדידת ליטרים
- מסכות חמצן (מבוגר, ילד)



© כל הזכויות שמורות






חמצן – סדר הפעולות

• סדר פתיחת מיכל החמצן:

1. חיבור המסכה לחמצן
2. פתיחת ווסת גדול
3. פתיחת ווסת קטן על זרימת ה- LPM הדרושה
4. ניפוח שקית העשרה
5. מתן חמצן לחולה

© כל הזכויות שמורות



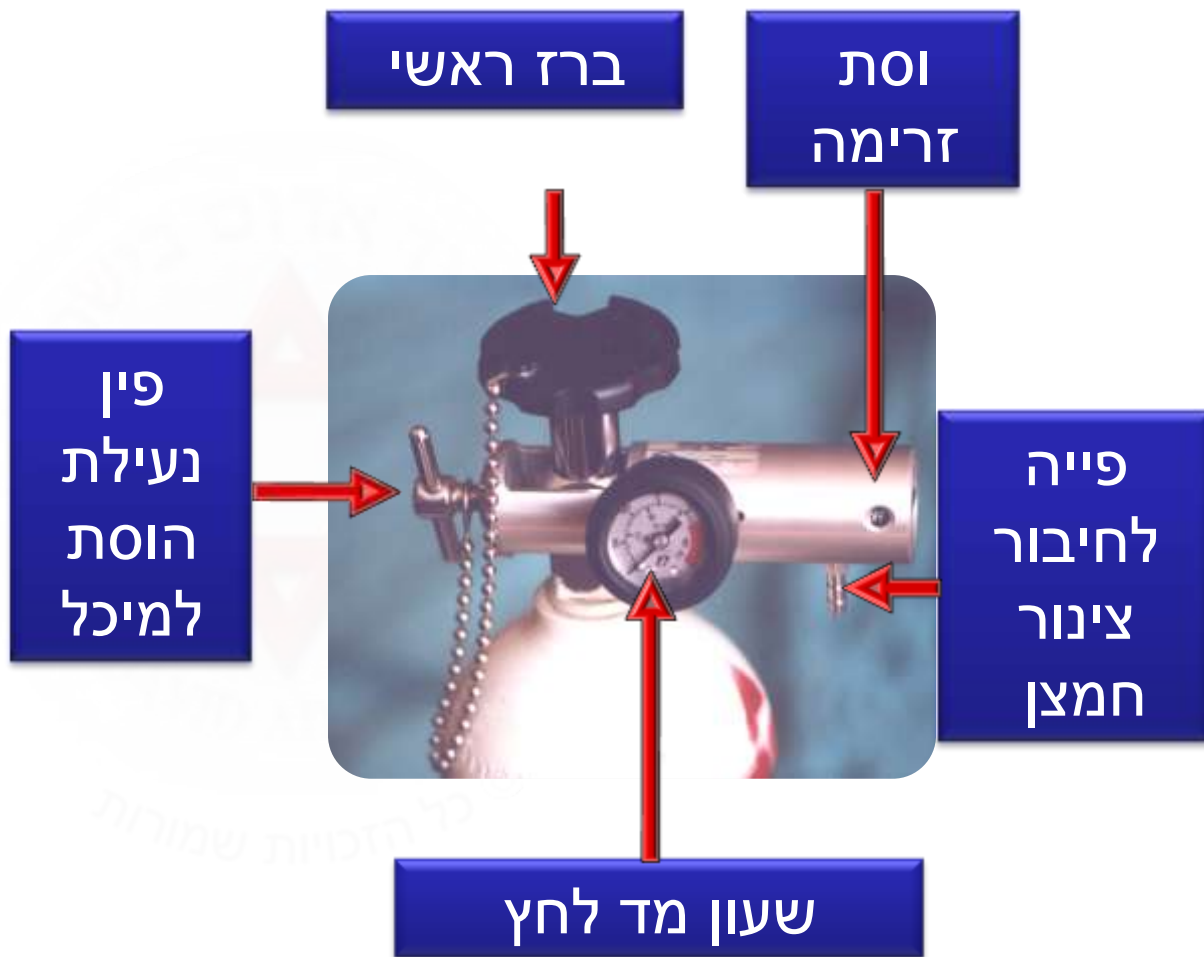



<u>גיל</u>	<u>מערכת העשרה</u>	<u>L.P.M.</u>	<u>% העשרה</u>
תינוק	קנולה לאף	2	30%
ילד	מסיכה לילד-עם שסתום אחד	10	85% - 60%
מבוגר	מסיכה עם שקית מאגר ושסתומים	10	90% - 85%
	מסיכת כיס	10	50%
	מפוח למבוגר	10-15	100% - 80%
	מפוח לתינוק	10-15	100%





חמצן - דגשים

- אם יש ספק, אז ספק
- חמצן=תרופה
- יש לחבר חמצן בהקדם האפשרי אך לא על חשבון רצף ההחייאה
- חובה לבדוק את כמות החמצן במיכלים בכל תחילת משמרת
- ראשית יש לנפח את שקית העשרה ורק אח"כ להניחה על פי החולה ואפו
- מעודף חמצן לא מת אף חולה , מחוסר-כן!!



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

מסכת כיס – pocket mask



© כל הזכויות שמורות





מסכת כיס – pocket mask

יתרונות:

- בטוחה לשימוש
- מאפשרת הנשמה דרך הפה והאף
- מאפשרת העשרה בחמצן
- מתאימה למבוגרים, ילדים ותינוקות
- אינה מחייבת שימוש במנתב אוויר
- מאפשרת הנשמה במקום מסיכת "מפוח"
- מאפשרת העשרת חמצן לחולה / ניפגע נושם
- מאפשרת ביצוע עיסוים והנשמות ע"י איש צוות בודד





יתרונות

- יעיל יותר

חסרונות

- מעייף

- מבצע את פעולה הכיווץ של

הלב-סיסטולה ופעולת

ההרפייה של הלב- דיאסטולה-

ע"י הוואקום

- משקלו 540 גרם



© כל הזכויות שמורות






עיסוי חזה אפקטיבי

מד עוצמת לחיצה / משיכה

משיכה:
0-15 ק"ג

לחיצה:
0-50 ק"ג

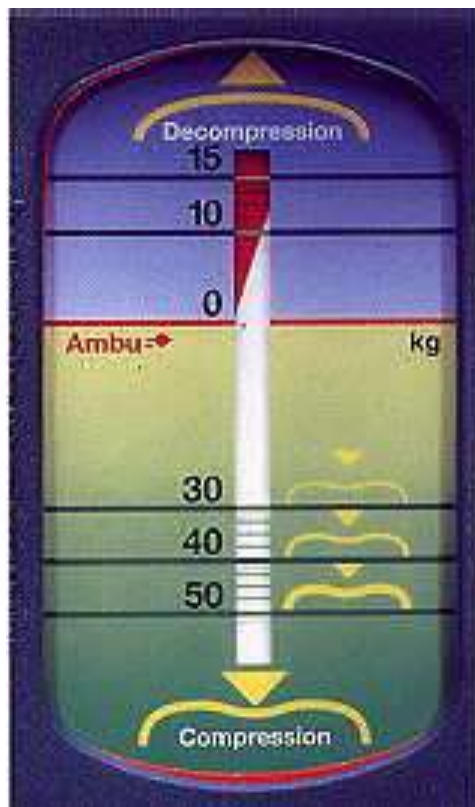

דיוק: $\pm 10\%$



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

דגשים להחייאת מכשירים

- בהחייאת זוגות מטפל ב' יוציא מכשירים



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות